

Katheterköcher

Standardversion und Langversion



Optimaler Schutz, hygienische Aufbewahrung

Der Katheterköcher dient zur sachgerechten Aufbewahrung von Kathetern. Um den steigenden Hygieneanforderungen auf den Stationen gerecht zu werden, konzipierte die Firma Herzmed GmbH den Katheterköcher gemäß der Hygieneanforderungen für Sterilgutversorgung (DIN 5893-8: 2010-05).

Die stabile Einheit wehrt Staub, Schmutz, übermäßigen Lichteinfluss sowie Beschädigungen durch mechanische Einflüsse ab. Ein trockener, abgeschlossener und sauberer Innenraum sowie glatte, pulverbeschichtete Oberflächen ermöglichen eine optimale hygienische Reinigung. Daher eignet sich die Einheit Katheterköcher & Aufbewahrungsbox besonders für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern, in Arztpraxen und im Pflegebereich.



Montage an Normschiene

Wandhalterung und Zubehör optional erhältlich.



Rückansicht



Trennblech

Highlights

- Kompakte Bauform
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Transparenter Deckel
- Hygienische Aufbewahrung durch geschlossenes System
- Flexible Höhenunterteilung
- Verplombung möglich
- Individuell an Bedürfnisse des Kunden anpassbar
- Anwendung in MRT-Räumen möglich*

*Anwendung in MRT-Räumen:
Der Katheterköcher besteht aus nichtmagnetischen Artikeln. (Aluminium, Kunststoff und Edelstahlverschraubungen). Im MRT-Raum ist eine Anwendung möglich. Eine eventuelle Beeinflussung der Bildgebung im MRT-System ist uns derzeit nicht bekannt. Prüfungen wurden von uns nicht durchgeführt.

Umlackierung möglich

Standardmäßig werden die Katheterköcher einheitlich in Weißaluminium RAL 9006 ausgeliefert. Eine Umlackierung gemäß RAL-Farbcode ist möglich.

Trennblech im Inneren

Ein herausnehmbares Trennblech teilt den Innenraum des Köchers in seiner Diagonalen. Diese Raumaufteilung ermöglicht ein ordentliches Trennen von 2 verschiedenen Kathetern.

Transparenter Deckel

Der transparente Verschlussdeckel verschafft ein schnelles und leichtes Einsehen in den Köcher und ermöglicht die optische Überprüfung der Füllmenge. Dank des Öffnungswinkels von 125° ist ein leichtes Befüllen und Entnehmen garantiert.

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Der Aluminiumköcher kommt mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Damit er jederzeit einsatzbereit ist, kann er entweder direkt an eine Wand montiert oder an Normschiene gehängt werden.

Ergonomische Lösungen für Ihren Arbeitsplatz

Der Katheterköcher kann individuell an Kundenwünsche angepasst werden. Dank verschiedener Innenraumaufteilung und diversen Befestigungsmöglichkeiten ist er immer und überall einsatzbereit. Auch eine Umlackierung in andere RAL Farben ist auf Anfrage möglich. Das Produkt legt seinen Fokus auch auf ergonomische Lösungen. Das zeichnet sich unter anderem durch die optimale Entnahme der Katheter aus.

Technische Spezifikationen

Größe und Gewicht Standardversion:

100 x 120 x 703 mm (B x T x H)
2200 g Leergewicht

Größe und Gewicht Langversion:

100 x 123 x 1052 mm (B x T x H)
3850 g Leergewicht

Farbgebung:

Gehäuse: RAL 9006,
Umlackierung auf Anfrage möglich
Deckel: Transparent

Material:

Deckel: PETG (mit Glykol modifiziertes Polyethylenterephthalat); Korpus und Einzelteile: Weißaluminium, pulverbeschichtet; Konischer Clip: Kunststoff PA66

Bestellinformationen

Set Artikel

Art.-Nr.	Beschreibung
311.217020	Katheterköcher Standardversion, montiert
311.218000	Katheterköcher Langversion, montiert


Art.-Nr.	Beschreibung
311.227022	Katheterköcher Standardversion Trennblech
311.227031	Katheterköcher Langversion Trennblech
311.227023	Katheterköcher Höhenteiler 2er Set inkl. 2x Clip
311.227024	Katheterköcher Deckel
311.227035	Katheterköcher Boden inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd
311.227025	Katheterköcher Standardversion Normschienenhalterung inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd
311.227026	Katheterköcher Abstandshalterung lang (inkl. 2x Clip)
311.227027	Katheterköcher Abstandshalterung kurz (inkl. 2x Clip)
311.227028	Katheterköcher Wandhalterung VESA 4x Linsenschrauben M5 x 10 und 4x Mutter M5, selbstsichernd
029.0446	Universalklaue (für Wandhalterung)
311.227031	Konischer Clip (Ersatzteilkit) bestehend aus 10 Stück
311.227032	Schraubensatz aus VA (Ersatzteilkit), 10x Linsenschrauben M5 x 10 und 10x Mutter M5, selbstsichernd

Ersatzteile und Zubehör

Lieferumfang SET


Grundkörper RAL 9006 // **Trennblech** // **Höhenteiler** 2er Set inkl. 2x Clip // **Deckel** inkl. Deckelniete // **Boden** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Normschienenhalterung** inkl. 2x Linsenschrauben M5 x 10 und 2x Mutter M5, selbstsichernd // **Abstandshalterung lang und kurz** (je inkl. 2x Clip) // **Gebrauchs- und Montageanleitung**

Bestellung und Beratung durch:

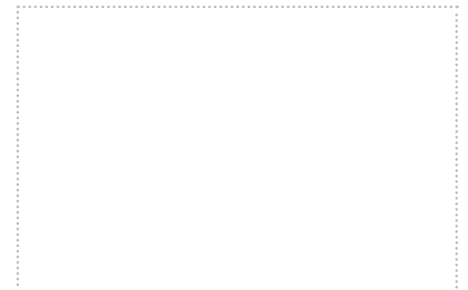

Scan for English version

herzmed.com/downloads

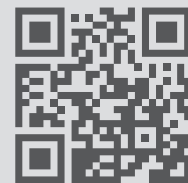

HERZmed GmbH

Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Tel.: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 0
Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9

Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

