

OP-Tischabdeckung

mit Flüssigkeitsabsorption



Anti-Kontamination
bis zu 3,5 l Absorption
günstig und effizient
strahlendurchlässig

HERZmed® OP-Tischabdeckung mit Flüssigkeitsabsorption

- Aufnahmefähigkeit von Flüssigkeiten bis zu 3,5 Liter
- flüssigkeitsundurchlässig
- strahlendurchlässig




Hygienisch und sicher

Die HERZmed® OP-Tischabdeckung (Einweg – nicht steril) wird angewendet als Auflage für OP-Tische, Untersuchungs-
liegen und Patientenbetten. Durch die integrierte, leistungsstarke Saugzone (drei Schichten bestehend aus PE-Folien,
Flockenzellstoff und Vlies) mit einem Aufnahmevolumen von bis zu 3,5 Liter wird ungewollte Stauflüssigkeit vermieden –
zum Vorteil des Patienten und der Einrichtung.

Durch die großzügigen Abmessungen wird der gesamte Arbeitsbereich sicher abgedeckt und gegen schadhafte
Einflüsse durch auftretende Feuchtigkeit effektiv geschützt.

Die Abdeckungen sind einzeln verpackt und entnehmbar, was Sie leichter, sicherer und vor allem hygienischer
lagerfähig macht.

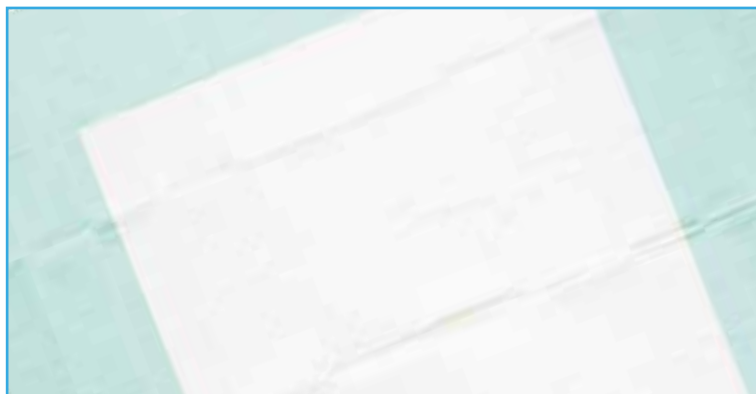

Highlights

- Gewährleistung einer hygienischen Arbeitsumgebung
- Minimierung von sogenannten Kreuz-Infektionen für Patienten und Personal
- Kostenoptimierung durch stark reduzierten Aufwand bei der Reinigung und Wiederaufbereitung des Transportmittels oder des OP's
- strahlendurchlässig
- Farbe: grün/weiß

Drei-Schicht-System für eine optimale Funktionsweise

PE-Folie: Die unterste Schicht (blau) besteht aus Polyethylen (PE-LD). Dieses Material verhindert ein Durchdringen von Flüssigkeiten. Durch die angeraute grüne Seite wird ein Verutschen des Tuchs verhindert und unterstützt den Verwender somit aktiv bei seiner Arbeit.

Flockenzellstoff: Die mittlere Schicht (Saugmedium) besteht aus Flockenzellstoff. Durch die besondere rautenförmige Anordnung wird die austretende Flüssigkeit schnell im Saugkörper verteilt.

Vlies: Die Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen Vliesgewebe. Die Vliesschicht bildet eine komfortable Patientenauflage mit angenehmer Haptik.



Drei-Schicht-System



3,5l Flüssigkeitsabsorbtion



Technische Details OP-Tischabdeckung

Abmessungen Haupttuch: 240 × 110 cm
Abmessungen Saugzone: 200 × 65 cm

Farbe Unterseite: grün


Eigengewicht: 260g

Polyethylen-Folie (PE)/Unterseite

Flockenzellstoff-Schicht/Saugmedium

Vlies-Schicht/Patientenauflage

Farbe Oberseite: weiß

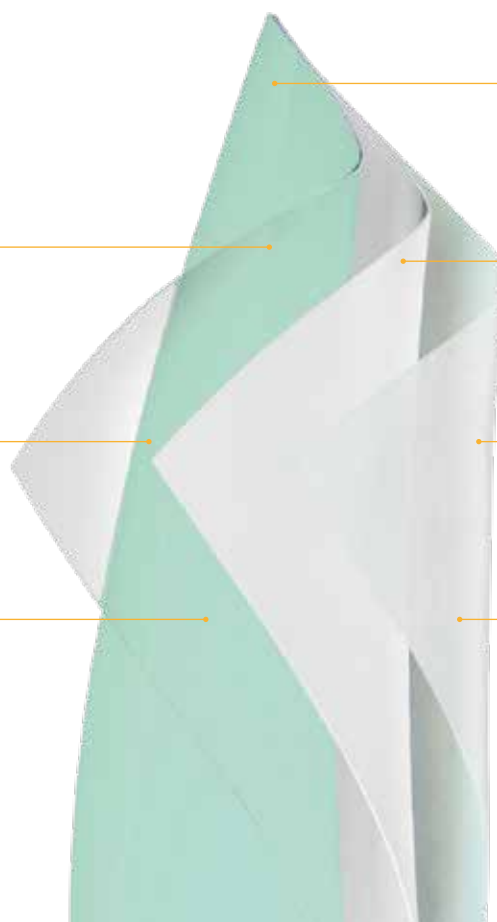

Technische Spezifikationen:

Größe und Gewicht:

Haupttuch: 240 × 110 cm (L × B)
Saugzone: 200 × 65 cm (L × B)
Gewicht: ca. 260g

Farbgebung:

Obere Schicht: Grün/Untere Schicht: Weiß

Material:

Unterseite: Polyethylen (PE)
Mittlere Schicht/Saugmedium: Flockenzellstoff
Patientenaufgabe: Vlies

Steril: nein

Verpackung: einzeln verpackt

Aufnahmevermögen:

Absorbiert bis zu 3,5l


Steril: nein

Verpackung: einzeln verpackt



Bestellinformationen

OP-Tischabdeckung

Abb.	Einheit	Art. Nr.	Beschreibung
	VE*	HZ-V100038	HERZmed® OP-Tischabdeckung (Einweg)

*VE (Verpackungseinheit) = 40 Stück – einzeln verpackt (= Mindestabnahmemenge)

Detailansichten

OP-Tischabdeckung



HERZmed® OP-Tischabdeckung
Detail Saugzone-Haupttuch



HERZmed® OP-Tischabdeckung
Detail aufgefächert



HERZmed® OP-Tischabdeckung
Verpackung (einzeln)

HERZmed GmbH
Fritz-Erler-Str. 113
90427 Nürnberg

Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9
Mail: herzmed@herzmed.de
Web: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

Versandkosten innerhalb Deutschlands (nur Festland): Bei einem Bestellwert unter 50,- €* berechnen wir eine Versandpauschale in Höhe von 5,- €. Ab einem Bestellwert über 50,- €* liefern wir versandkostenfrei. **Versandkosten nach Österreich, B/N/LUX-Staaten (nur Festland und EU):** Wir berechnen bei jedem Paket eine Versandpauschale in Höhe von 10,- €* (versicherte Lieferung). Abweichende Versandkosten können bei Sonderkonditionen gelten.

HM1805

